

MEKE LEČE U BOJI

PAKET SADRŽI

1x meke kontaktne leće




RASPORED NOŠENJA

Leće su prikladne za dnevnom vrijeme. Kad ih prvi put budete nosili, mogli biste osjetiti nelagodu koja će nestati, ukoliko postupno prilagodite oči na leće. Počnite s najviše četiri sata, a zatim povećavajte za dva sata svaki dan dok ne dođete do 12 sati. Nemojte spavati s lećama, jer možete trajno oštetiti oči.

KAKO KORISTITI

- Prvo, dobro operite ruke i osušite ih.
- Otvorite futrolu kontaktnih leća i vrhom prsta stavite prvu kontaktnu leću u svoju nedominantnu ruku.
- Isperite leću otopinom za kontaktne leće. Nikada nemojte koristiti običnu vodu.
- Stavite leću na vrh kažiprsta ili srednjeg prsta dominantne ruke.
- Provjerite je li leća oštećena i je li ispravna strana okrenuta prema gore. Rubovi leće trebaju se okrenuti prema gore kako bi oblikovali zdjelu, a ne prema dolje. Ako je okrenuta prema dolje, lagano je preokrenite. Ako je leća oštećena, nemojte je koristiti.
- Pogledajte se u ogledalo i držite gornji i donji kapak otvorenim rukom ne držeći leću.
- Pogledajte ispred sebe ili prema stropu i stavite leću u oko.
- Polako zatvorite i okrenite oko ili lagano pritisnite kapak kako biste stavili leću na svoje mjesto. Leća ne bi trebala stvarati nelagodu i trebali biste moći jasno vidjeti nakon treptanja nekoliko puta. Ako vam nije ugodno, nježno izvadite leću, isperite je i pokušajte ponovo.
- Ponovite s drugom lećom.
- Za vađenje leća: prvo oprati ruke. Potpuno razmaknite kapke kao kad stavljate leće, uhvatite dno leće tražilicom, a ne noktima i polako i nježno vadite.

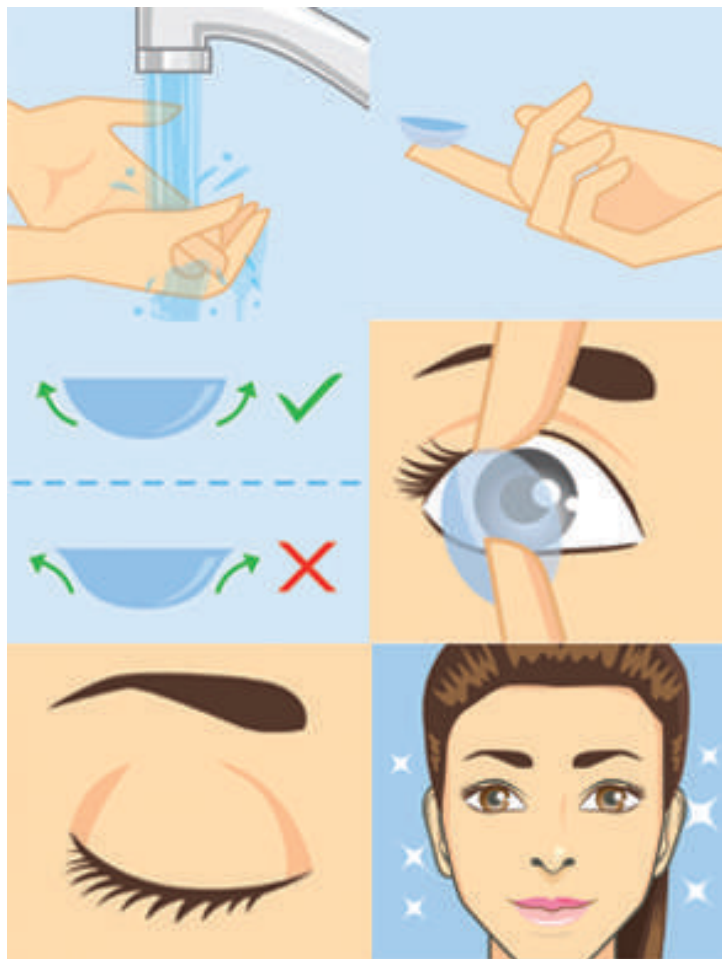

NUSPOJAVE

Ako se ne brinete o lećama, možete osjetiti pečenje u predjelu očiju, svrbež i neugodnost. To se mogu pojaviti zbog očnih bolesti. Ako osjećate bilo kakvu nelagodu, posjetite svog liječnika.

ODRŽAVANJE I SPREMANJE

- Ako kontaktne leće ne nosite, spremite ih u zatvorenu futrolu za leće. Nemojte čuvati leće u običnoj fiziološkoj otopini. Fiziološka otopina ne dezinficira. Leće se mogu čuvati u neotvorenom kućištu dok ne budu spremne za nošenje, najviše do 30 dana.
- Nemojte ponovno koristiti staru otopinu ili "dolijevati" otopinu u kućištu leće.
- Ne prebacujte otopinu kontaktnih leća u manje spremnike veličine putovanja. To može utjecati na sterilnost otopine, što može dovesti do infekcije oka.
- Ne dopustite da vrh bočice s otopinom dođe u kontakt s bilo kojom površinom i držite bočicu dobro zatvorenu kad se ne koristi.
- Ako leće čuvate u kućištu dulje vrijeme, pogledajte upute za leće ili otopinu kontaktnih leća kako biste utvrdili je li potrebno ponovno dezinficiranje leća prije nošenja. Ni u kojem slučaju ne biste trebali nositi leće nakon skladištenja nakon 30 dezinfekcija.

UPOZORENJE

- Ovaj je proizvod u izravnom kontaktu s rožnicom, prije uporabe razgovarajte sa svojim liječnikom. Ako se pojave bilo kakvi problemi, odmah se obratite liječniku kako biste spriječili trajno oštećenje vida.
- Nosite strogo prema - Tablici vremena nošenja i ne nosite dnevne leće tijekom spavanja.
- Ako je paket na bilo koji način oštećen, NE KORISTITE!
- Ne mijenjajte leće, uvijek ih koristite na istom oku. Desna leća uvijek mora ići u desno oko, isto kao i lijevo.
- Nemojte spavati ili plivati tijekom upotrebe leća. Ne dijelite s drugima.

JAMSTVO

- Jamstvo vrijedi 24 mjeseca od datuma kupnje. Jamstvo možete iskoristiti od tvrtke D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija, tražeći besplatnu zamjenu ili povrat vrijednosti neprikladnog proizvoda.
- Pošaljite nam e-mail s brojem narudžbe i datumom kupnje. Proizvod ima rok trajanja 24 mjeseca od datuma primitka proizvoda.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenija.