

LENTI COLORATE MORBIDE**CHE COSA INCLUDE IL PACCHETTO**

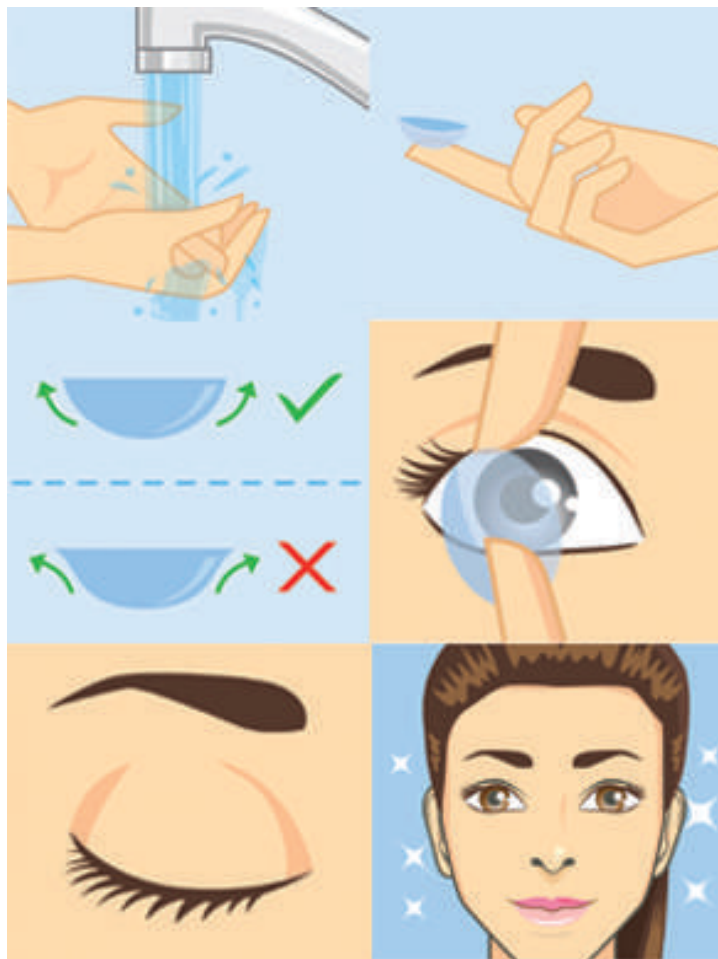
1x lenti a contatto morbide

**TABELLA DEI TEMPI D'USO**

Le lenti sono appropriate per il giorno. Quando le indossi per la prima volta potresti sentire un leggero fastidio, che andrà via se adatterai gradualmente i tuoi occhi alle lenti. Comincia con un massimo di quattro ore e poi aumenta di due ore ogni giorno fino ad arrivare a 12 ore. Si prega di non dormire con le lenti a contatto, si può danneggiare permanentemente gli occhi.

COME USARE

- Per prima cosa, lavarsi bene le mani e asciugarle bene.
- Apri la custodia delle lenti a contatto e usa la punta delle dita per mettere la prima lente a contatto nella tua mano non dominante.
- Sciacquare la lente con la soluzione per lenti a contatto. Non usare mai acqua normale.
- Metti la lente sulla parte superiore del dito indice o medio della tua mano dominante.
- Controlla che la lente non sia danneggiata e che il lato corretto sia rivolto verso l'alto. I bordi della lente dovrebbero risalire per formare una ciotola, non capovolgerti. Se è al rovescio, giratelo delicatamente. Se la lente è danneggiata, non usarla.
- Guardati allo specchio e tieni aperte le palpebre superiori e inferiori con la mano che non tiene la lente.
- Guarda davanti a te o in alto verso il soffitto e metti la lente nell'occhio.
- Chiudi l'occhio lentamente e fai rotolare l'occhio o premi delicatamente la palpebra per sistemare la lente in posizione. La lente dovrebbe essere comoda, e si dovrebbe essere in grado di vedere chiaramente dopo aver sbattuto le palpebre un paio di volte. Se non è comodo, tira fuori delicatamente la lente, sciacquala e prova di nuovo.
- Ripeti con la seconda lente.
- Per estrarre: prima lavarsi le mani. Allarga completamente le palpebre come quando le hai messe dentro, pizzica il fondo della lente con il tuo mirino, non con le unghie e togli lentamente e delicatamente.

**EFFETTI COLLATERALI**

Se non ci si prende cura delle lenti, queste possono far sentire gli occhi come se bruciassero, prudevano e davano fastidio. Questo può verificarsi malattie degli occhi. Se si sente un qualsiasi fastidio, vada a visitare il suo medico.

CURA E CONSERVAZIONE

- Se non indossi le lenti a contatto immediatamente, conservale in una custodia chiusa. Non conservare le lenti in semplice soluzione salina. La soluzione salina non disinfetta. Le lenti possono essere conservate nella custodia non aperta fino a quando non sono pronte per essere indossate, fino a un massimo di 30 giorni.
- Non riutilizzare la vecchia soluzione o "rabboccare" la soluzione nella custodia delle lenti.
- Non trasferire la soluzione per lenti a contatto in contenitori più piccoli da viaggio.
- Questo può influenzare la sterilità della soluzione, che può portare a un'infezione oculare.
- Non permettere che la punta del flacone di soluzione entri in contatto con qualsiasi superficie, e tenere il flacone ben chiuso quando non è in uso.
- Se si conservano le lenti nella custodia per un lungo periodo di tempo, consultare le istruzioni per le lenti o la soluzione per lenti a contatto per determinare se è opportuno disinfettare nuovamente le lenti prima di indossarle. In nessun caso si devono indossare le lenti dopo la conservazione per 30 ri-disinfezione.

AVVERTIMENTO

- Questo prodotto è in contatto diretto con la cornea, si prega di parlare con il medico prima dell'uso. se si verificano problemi si prega di trattare immediatamente prevenire danni visivi permanenti.
- Indossare rigorosamente secondo la - Tabella dei tempi di utilizzo e non indossare le lenti a tempo giornaliero durante il sonno.
- Se la confezione è danneggiata in qualsiasi modo **NON UTILIZZARE!**
- Non cambiare le lenti, usa sempre la stessa nello stesso occhio. La lente destra, deve sempre andare nell'occhio destro, lo stesso con il sinistro.
- Non dormire o nuotare durante l'uso a contatto. Non condividere con altri.

GARANZIA

- La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto. Puoi richiedere la garanzia a D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia, richiedendo la sostituzione gratuita o il rimborso del valore del prodotto non idoneo.
- Mandaci un'e-mail con il numero d'ordine e la data d'acquisto. Il prodotto ha una durata di conservazione di 24 mesi dalla data di ricevimento del prodotto.

**CONTATTO**

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB d.o.o., Volčji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovenia.