

Mäkké farebné šošovky

ČO OBSAHUJE BALENIE

- 1x mäkké kontaktné šošovky




TABUĽKA ČASOVÉHO NOSENIA

Šošovky sú vhodné pre dennú dobu. Pri prvom nosení môžete pociťovať mierne nepohodlie, ktoré zmizne, ak si oči postupne prispôbiate šošovkám. Začnite maximálne so štyrmi hodinami a potom každý deň zvyšujte o dve hodiny, kým sa nedostanete na 12 hodín. Prosím, nespíte s šošovkami, môžete si natrvalo poškodiť oči.

AKO POUŽIŤ

- Najskôr si dôkladne umyte ruky a dobre ich osušte.
- Otvorte puzdro na kontaktné šošovky a špičkou prsta vložte prvú kontaktnú šošovku do nedominantnej ruky.
- Opláchnite šošovku roztokom kontaktných šošoviek. Nikdy nepoužívajte bežnú vodu.
- Šošovku nasadte na hornú časť ukazováka alebo prostredníka svojej dominantnej ruky.
- Skontrolujte, či šošovka nie je poškodená a že správna strana smeruje hore. Okraje šošovky by sa mali krútiť nahor, aby vytvorili miskú a aby sa nevyklopili. Ak sú naruby, jemne ich otočte. Ak je šošovka poškodená, nepoužívajte ju.
- Pozerajte sa do zrkadla a držte horné a dolné viečka otvorené rukou, ktorou nedržíte šošovku.
- Pozerajte sa pred seba alebo hore k stropu a vložte si šošovku do oka.
- Pomaly zatvárajte oči a buď ich vyvalujte okolo, alebo jemne zatlačte na očné viečko, aby ste nasadili šošovku na miesto. Šošovku by sa mali cítiť pohodlne a po niekoľkonásobnom žmurknutí by ste mali byť jasne vidieť. Ak to nie je to pohodlné, opatrne vyberte šošovku, opláchnite ju a skúste to znova.
- Opakujte postup s druhou šošovkou.
- Vybratie: najskôr si umyte ruky. Očné viečka roztrhajte úplne rovnako, ako keď ich vkladate, zovriete spodnú časť šošovky, nie nechtami a pomaly a jemne vytiahnite.

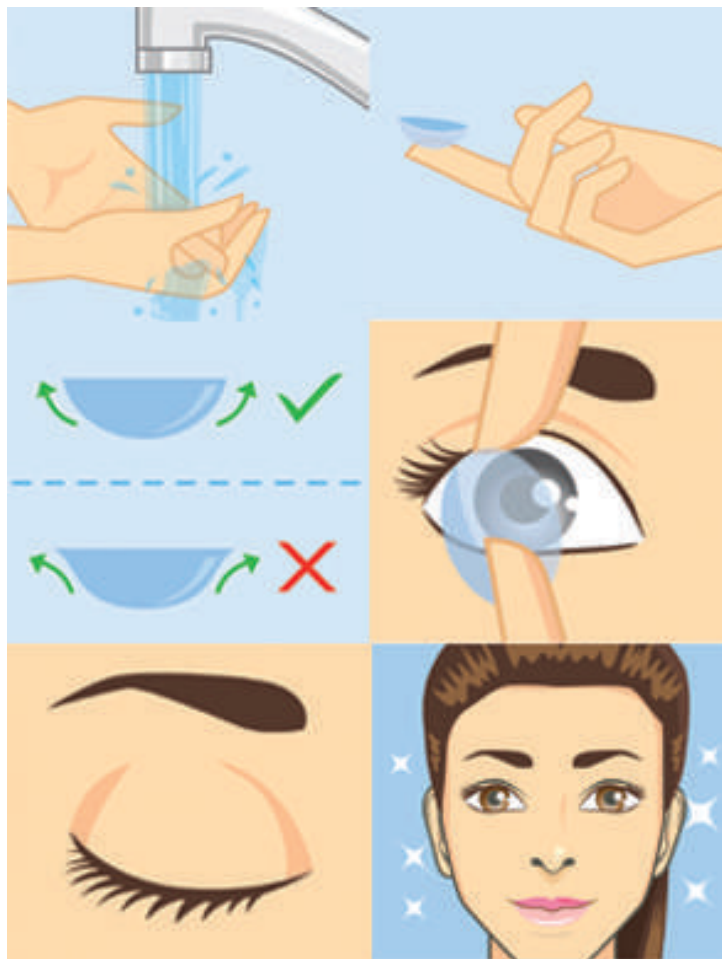

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Ak sa nestaráte o šošovky, môžu spôsobiť svrbiace a neprijemné bolesti vašich očí. Môžu sa vyskytnúť očné choroby. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, navštívte svojho lekára.

STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE

- Ak kontaktné šošovky nepoužívate okamžite, uložte ich do uzavretého puzdra na šošovky. Neuchovávajte šošovky v jednoduchom solnom roztoku. Solný roztok nebude dezinfikovať. Šošovky sa môžu uchovávať v neotvorenom puzdre až do doby, kým nie sú pripravené na nosenie, a to najviac 30 dní.
- Nepoužívajte znovu starý roztok alebo ho „nedopĺňajte“ v puzdre na šošovky.
- Neprevádzajte roztok kontaktných šošoviek do menších nádob veľkosti cestovného. To môže mať vplyv na sterilitu roztoku, čo môže viesť k infekcii očí.
- Nedovoľte, aby sa hrot fľaše s roztokom dostal do kontaktu s akýmkoľvek povrchom. Ak fľašu nepoužívate, udržiavajte ju tesne uzavretú.
- Ak šošovky skladujete v puzdre dlhší čas, pozrite si pokyny pre šošovky alebo roztok kontaktných šošoviek, aby ste zistili, či je dezinfekcia šošoviek vhodná skôr, ako ich budete nosiť. V žiadnom prípade by ste nemali nosiť šošovky po 30. dezinfekcii.

UPOZORNENIE

- Tento výrobok je v priamom kontakte s rohovkou, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom. ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, okamžite ich ošetrte, aby ste zabránili trvalému poškodeniu zraku.
- Noste striktné podľa - tabuľky časových intervalov nosenia a počas spánku šošovky nenoste.
- Ak je obal akýmkoľvek spôsobom poškodený, NEPOUŽÍVAJTE!
- Nezamieňajte šošovky, vždy používajte ten istý na jedno oko. Pravá šošovka musí ísť vždy do praveho oka, rovnako ako do ľavého.
- Počas kontaktného používania nespíte ani neplávajte. Nezdíľajte s ostatnými.

ZÁRUKA

- Záruka platí 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruku môžete uplatniť na D4 WEB d.o.o., Volčji Potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko, kde požadujete bezplatnú výmenu alebo vrátenie hodnoty nevhodného produktu.
- Pošlite nám e-mail s číslom objednávky a dátumom nákupu. Produkt má záruku 24 mesiacov od dátumu prijatia produktu.



KONTAKT

E-mail: support@d4web.eu
D4 WEB doo, Vol č ji potok 24g, 1235 Radomlje, Slovinsko.